

INSTRUÇÕES DE USO

HOOKUP Registro ANVISA: 80739429008

Passador de Sutura ALL-Inside

Produto implantável de Uso Único. Esterilizado por Óxido de Etileno

ESTÉRIL

Após a abertura da embalagem, o conteúdo não utilizado deve ser descartado, mesmo que não tenha entrado em contato com o paciente.

ATENÇÃO: É imprescindível a leitura deste manual antes da utilização do Produto. A utilização do HOOKUP deve ser realizada somente por Cirurgiões Ortopédicos habilitados, com treinamento específico nos procedimentos ortopédicos de sutura de menisco que utilizam os Modelos Comerciais da Família **HOOKUP**.

1. DESCRIÇÃO:

HOOKUP é a denominação comercial da família de dispositivos médicos de classe II, composta por dois modelos comerciais, fornecidos estéreis, classificados como Passador de Sutura – Código 1551622, segundo o nome técnico da ANVISA, de uso transitório e reprocessamento proibido.

Os modelos que constituem a família de dispositivos médicos são indicados para uso profissional, especificamente, de cirurgiões ortopédicos, em procedimentos de sutura endoscópicas do joelho para fixar porções lesionadas do menisco, mais especificamente, a região posterior do menisco medial, em lesões conhecidas como “lesões em rampa” ou “lesões ocultas”, permitindo o retensionamento das lesões meniscais e promovendo um reparo eficaz do menisco de forma mais rápida e eficiente. É importante salientar que os modelos comerciais do **HOOKUP** devem ser utilizados com fios de sutura e os menos não são fornecidos (**fornecidos separadamente**).

Os modelos comerciais do produto **HOOKUP** são compostos por um Dispositivo Introdutor Descartável fabricado em Aço Inoxidável Cirúrgico (reprocessamento proibido). O manípulo plástico do Introdutor Descartável é fabricado em copolímero acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), a Roldana é fabricada em copolímero acetal ou polióxido de metileno (POM) e a Capa Elastomérica é fabricada em termoplástico vulcanizado (TPV) em matriz de polipropileno (PP), a Bucha de entrada de entrada do fio fabricada em Aço Inox 303 ASTM F899-23, o Anel de travamento do cabo fabricado em Aço Inox 304 ASTM F899-23; o Gancho canulado afiado fabricado em Aço Inox 17-4PH ASTM F899-23, e a Haste fabricada em Aço Inox 420B temperado ASTM F899-23. A composição será descrita e ilustrada no tópico a seguir.

2. MODELOS COMERCIAIS:

A família **HOOKUP** possui dois Modelos Comerciais:

Tabela 1 - Modelos comerciais do produto HOOKUP.



HOOKUP	
MODELOS COMERCIAIS	CÓDIGO
HOOKUP SUTURA LESAO RAMPA M CURVA DIR	1294447
HOOKUP SUTURA LESAO RAMPA M CURVA ESQ	1294457

Os Modelos Comerciais se diferenciam pela geometria da ponta da haste do Introdutor Descartável, denominando-se **DIR** para o modelo com inclinação para direita e **ESQ** para o modelo com inclinação para esquerda. A tabela 2 apresenta as características dos modelos comerciais citados.

Tabela 2 - Características e Composição Química dos Modelos Comerciais do HOOKUP.

HOOKUP			
MODELOS COMERCIAIS	CÓDIGO	APRESENTAÇÕES	COMPOSIÇÃO QUÍMICA

**Instruções de Uso HOOKUP | VS.:02
02/2025**

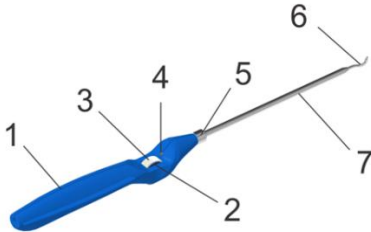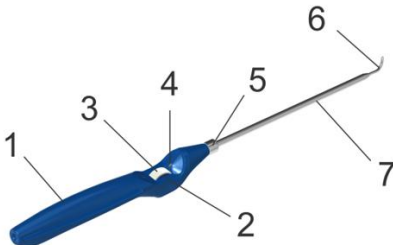HOOKUP SUTURA LESAO RAMPA M CURVA DIR	1294447		1 - Cabo: ABS (Copolímero acrilonitrila-butadieno-estireno); 2 - Roldana: POM (Copolímero Polióxido de Metileno) azul escuro; 3 - Capa Elastomérica: TPV (Copolímero etileno-propileno-dieno (EPDM) em matriz de polipropileno (PP)) de cor natural; 4 - Bucha entrada do fio: Aço Inox 303 ASTM F899-23; 5 - Anel de travamento do cabo: Aço Inox 304 ASTM F899-23; 6 - Gancho canulado afiado: Aço Inox 17-4PH ASTM F899-23; 7 - Haste: Aço Inox 420B temperado ASTM F899-23.
HOOKUP SUTURA LESAO RAMPA M CURVA ESQ	1294457		

Nome Técnico ANVISA: Passador de Sutura – Código 1551622.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

A composição química dos componentes dos modelos comerciais do produto **HOOKUP**, é descrita:

- 1. Introduutor Haste:** Aço Inox 420B temperado ASTM F899-23
- 2. Introduutor Cabo/Manípulo:** ABS azul (Copolímero acrilonitrila-butadieno-estireno);
- 3. Roldana:** POM (Copolímero Polióxido de Metileno) azul escuro;
- 4. Capa Elastomérica:** TPV (Copolímero etileno-propileno-dieno (EPDM) em matriz de polipropileno (PP)) de cor natural
- 5. Bucha entrada do fio:** Aço Inox 303 ASTM F899-23
- 6. Anel de travamento do cabo:** Aço Inox 304 ASTM F899-23
- 7. Gancho canulado afiado:** Aço Inox 17-4PH ASTM F899-23

Importante: Os Introdutores Descartáveis são materiais NÃO IMPLANTÁVEIS, de USO ÚNICO e de REPROCESSAMENTO PROIBIDO conforme estabelecido no texto do Capítulo III (Art. 28, § 1º) da RDC 594 DE 2021.

Os Introdutores Descartáveis deverão ser descartados ao final do procedimento cirúrgico de acordo com as recomendações apresentadas no Item 10 – Descarte do presente manual de Instruções de Uso.

4. INDICAÇÕES DE USO:

Os modelos comerciais do produto **HOOKUP** são indicados para promover a união de tecidos moles através da passagem do dispositivo de sutura em procedimento artroscópico do joelho para reparo de lesão em rampa e lesão posterior do menisco medial, com o uso da técnica cirúrgica all-inside.

O modelo comercial 1294447 – HOOKUP SUTURA LESAO RAMPA M CURVA DIR é indicado, especificamente, para o procedimento de reparo de lesão em rampa do joelho esquerdo enquanto o 1294457 – HOOKUP SUTURA LESAO RAMPA M CURVA ESQ é indicado, especificamente, para o procedimento de reparo de lesão em rampa do joelho direito.

IMPORTANTE: O fio de sutura utilizado para execução da técnica cirúrgica não é fornecido junto ao produto HOOKUP.

Os passadores de suturas da família **HOOKUP** serão fornecidos estéreis, portanto, deverão ser descartados após o uso.

O Cirurgião Ortopédico responsável pelo procedimento deve ter qualificação adequada e conhecimento pleno da técnica cirúrgica a ser empregada para a utilização segura e eficaz do produto.

5. CONTRAINDICAÇÕES:

- Qualquer procedimento cirúrgico não listado no item INDICAÇÕES DE USO.
- Sinais de infecções agudas ou crônicas, locais ou sistêmicas.
- Infecção ativa.

6. ADVERTÊNCIAS:

Os procedimentos cirúrgicos e pré-cirúrgicos, incluindo o conhecimento das técnicas cirúrgicas e a correta seleção do modelo comercial são considerações importantes para a utilização segura e eficaz deste produto.

- Não utilizar os passadores de sutura em procedimentos cirúrgicos não previstos nas indicações deste manual de instruções de uso.
- Os Modelos Comerciais da família **HOOKUP** são fornecidos ESTÉREIS, e devem ser descartados após o uso.
- Não utilizar o produto após o término do prazo de validade indicado no rótulo. VERIFICAR DATA DE VALIDADE ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.
- O **HOOKUP** é um produto destinado a USO ÚNICO, NÃO DEVE EM HIPÓTESE - ALGUMA SER REUTILIZADO.
 - **NÃO REUTILIZAR;**
 - **PROIBIDO REPROCESSAR;**
 - **PRODUTO DE USO ÚNICO;**
 - **PRODUTO ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO;**
 - **PRODUTO ESTÉRIL - NÃO REESTERILIZAR;**
- O cirurgião deverá evitar a utilização do produto caso sua embalagem primária ou secundária tenha sido violada antes do momento de sua utilização.
- Uma vez rompida a embalagem, o produto deverá ser imediatamente utilizado ou descartado conforme Regulamentação indicada neste Manual.
- Recomenda-se que o profissional de saúde realize uma inspeção criteriosa no instrumento previamente ao procedimento cirúrgico, prevenindo assim qualquer condição prejudicial ao seu funcionamento.
- O cirurgião deve estar familiarizado com o protocolo cirúrgico da utilização destes instrumentos, previamente à sua utilização, procurando informações junto aos distribuidores ou fabricante, além da leitura recomendada destas instruções.
- Não tentar dobrar a haste canulada ou a ponta do introdutor descartável. Dobrar a haste inadvertidamente pode quebrá-la durante uso e/ou dificultar ou impossibilitar a

passagem de qualquer fio de sutura. Os modelos comerciais do **HOOKUP** possuem pontas com geometrias fabricadas corretamente para auxiliar o acesso à lesão para cada joelho.

- A disposição de força excessiva no manuseio dos instrumentos pode causar danos aos materiais, prejudicando seu desempenho e possivelmente causando prejuízos à saúde do paciente.
- Após a utilização, este dispositivo poderá representar um potencial perigo devido às superfícies pontiagudas, devendo ser descartadas em recipiente específico para materiais perfuro-cortantes conforme apresentado no item DESCARTE do presente manual.

ATENÇÃO: OS PASSADORES DE SUTURA SÃO FORNECIDOS DE FORMA INDIVIDUAL. ESTÉREIS, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, PORTANTO, DEVEM SER DESCARTADOS APÓS SUA UTILIZAÇÃO.

7. PRECAUÇÕES:

- A utilização clínica não deve ser iniciada sem que as instruções de utilização sejam revistas.
- O usuário deverá verificar a versão correta das Instruções de Uso informada na rotulagem do produto adquirido.
- O cirurgião responsável e os demais profissionais de saúde devem estar familiarizados com a técnica cirúrgica apropriada em relação a utilização do instrumento.
- O usuário deverá inspecionar previamente a embalagem quanto à sua integridade como forma de garantia a esterilidade do produto adquirido.
- O instrumento deve ser inspecionado, antes do uso, de forma a verificar se há danos, devendo este ser substituído caso haja. O instrumento danificado não deverá ser utilizado. O operador não deve tentar, em hipótese alguma, afiar, endireitar ou reparar o instrumento.
- Os passadores de sutura que forem removidos de sua embalagem, mesmo sem utilização, perdem a condição de esterilidade e por isso não devem ser usados nem reprocessados.
- **PROIBIDO REPROCESSAR.** A reutilização implica em alto risco de contaminação e pode afetar o desempenho do produto.

8. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O princípio de funcionamento do dispositivo médico é promover a união de tecidos moles através da passagem do dispositivo de sutura, portando uma agulha canulada curva, com geometria específica de modo a atender o joelho lesionado, direito ou esquerdo.

IMPORTANTE: O fio de sutura utilizado para execução da técnica cirúrgica não é fornecido junto ao produto HOOKUP.

Os passadores de suturas da família **HOOKUP** serão fornecidos estéreis, portanto, deverão ser descartados após o uso.

9. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- Antes de utilizar, inspecionar a embalagem do produto quanto a sinais de adulteração, danos ou contaminações. Contate o representante da Síntegra Surgical Sciencies Ltda caso a embalagem tenha sido aberta ou violada.
- O produto nunca deverá ser utilizado caso o lacre esteja violado.

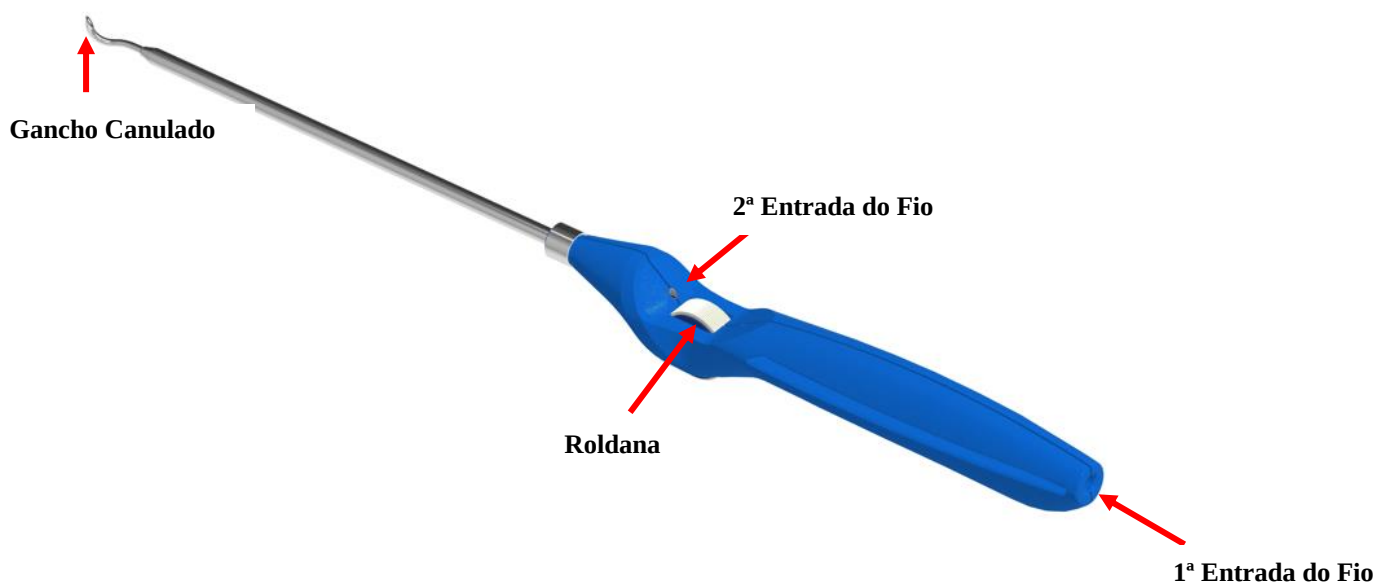


Figura 1: Partes e mecanismos do Dispositivo Introdutor descartável comum a todos os Modelos Comerciais do Passador de Sutura **HOOKUP**: Entradas para o fio de sutura, Roldana e Gancho Canulado.

- 9.1.** Identificar o dispositivo a ser utilizado de acordo com a lateralidade. Para a realização das suturas, o modelo **1294447 - HOOKUP SUTURA LESAO RAMPA M CURVA DIR** é projetado para uso em JOELHO ESQUERDO, e o Modelo **1294457 - HOOKUP SUTURA LESAO RAMPA M CURVA ESQ** em JOELHO DIREITO, pois o nome é referente à geometria do Gancho Canulado.
- 9.2.** Carregar com um fio de monofilamento absorvível nº 1 de polidioxanona (PDS), FORNECIDO SEPARADAMENTE (Registro à parte na ANVISA). Inserir o fio pela 1ª entrada (conforme Figura 1), coletar do outro lado e inserir pela 2ª entrada, utilizando a Roldana para uma passagem mais rápida e prática até que o fio seja visível na saída do Gancho Canulado.

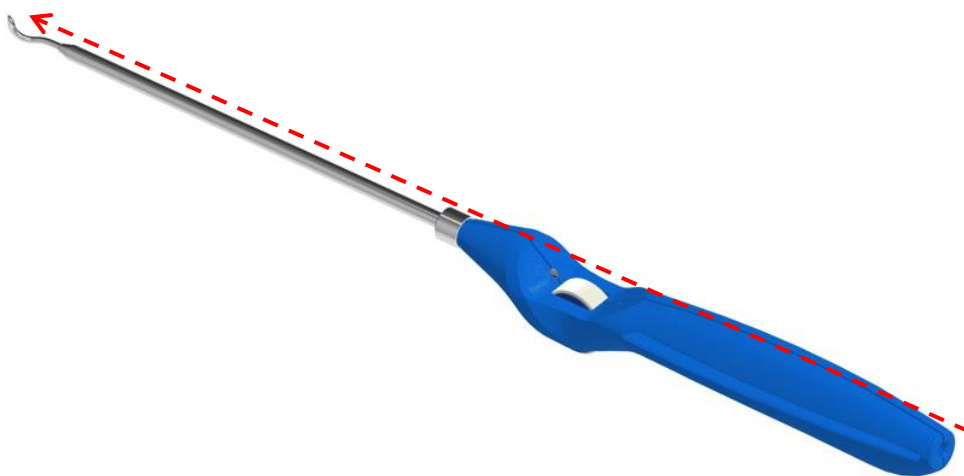



Figura 2: Sentido da montagem do fio de PDS (FORNECIDO SEPARADAMENTE, com Registro à parte na ANVISA).

NOTA: Retraia qualquer sutura exposta até que esteja abaixo da ponta afiada do Gancho Canulado antes de passar pelos tecidos a serem unidos.

- 9.3.** Manipular o gancho de sutura de maneira que a ponta afiada penetre no fragmento periférico da lesão com a parte capsular, de superior para inferior, em toda sua espessura (A). Em seguida, passar o gancho de sutura da mesma forma, através da parte central do menisco medial, de inferior para superior (B). Avançar o fio com auxílio da Roldana do dispositivo. A extremidade

**Instruções de Uso HOOKUP | VS.:02
02/2025**

livre do fio é, então, pega com uma pinça artroscópica (FORNECIDA SEPARADAMENTE, com Notificação à parte na ANVISA) e recolhida pelo portal posteromedial (C). Recolher o dispositivo de forma a obter as duas pontas livres do fio para fora do portal. Realizar a confecção dos pontos, com nós deslizantes, com o auxílio de um empurrador de nós (FORNECIDO SEPARADAMENTE, com Notificação à parte na ANVISA) (D). O reparo satisfatório e estável é confirmado por avaliação com uso de uma sonda (FORNECIDA SEPARADAMENTE, com Notificação à parte na ANVISA), inserido e visualizado pelos portais anteriores e posteromedial.

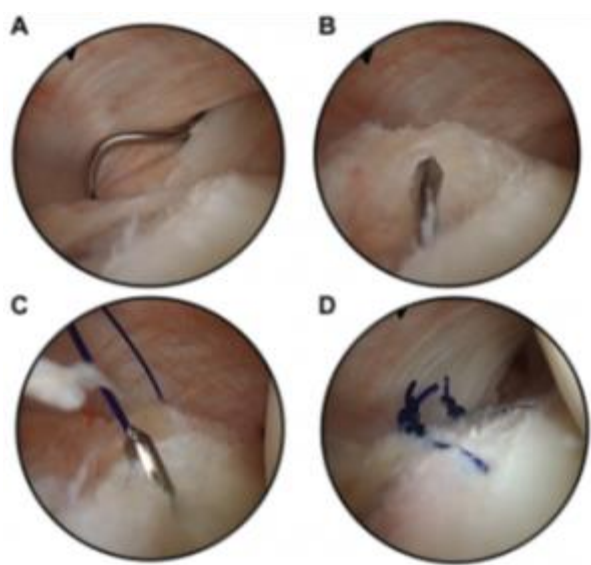

- A** - Acesso pósterio medial com o gancho para suturar a capsula pósterio medial.
- B** – É Passado o gancho pela capsula pósterio medial.
- C** – Em seguida passa-se o gancho pelo menisco medial e avança-se o fio de PDS.
- D** – São dados os pontos no PDS número 1 pelo portal pósterio medial.

10. EFEITOS ADVERSOS:

- Reações alérgicas ou outras aos materiais do produto.

11. DESCARTE:

O Dispositivo Introdutor descartável dos Modelos Comerciais do produto **HOOKUP** devem ser descartados em recipientes específicos de acordo com os preceitos estabelecidos pela Resolução

RDC 222 de 2018 que regulamenta as **Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde**, bem como em conformidade com as Legislações complementares que foram publicadas a partir da referida data. Produto de Uso Único – Proibido Reprocessar. Produto Estéril – Não Reesterilizar.

12. RECLAMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES RELACIONADAS AO PRODUTO:

NOS CASOS DE RECLAMAÇÕES, QUEIXAS TÉCNICAS OU EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS AO PRODUTO, O USUÁRIO DEVERÁ NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O FABRICANTE SÍNTEGRA SURGICAL SCIENCES LTDA NOS CANAIS A SEGUIR.

CANAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

- **Telefone:** (14) 3405-2373 / **Endereço de e-mail:** sintegra.sac@sintegrasurgical.com.br

Horário de atendimento: Das 08:00 às 17:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, exceto feriados.

PORTAL DE TECNOVIGILÂNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA:

- **Endereço de acesso ao portal NOTIVISA:** <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes/produtos>

Orientações: Na página inicial de notificação da ANVISA (endereço eletrônico: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes/produtos>, o usuário deverá seguir as orientações, identificando o tipo de notificação e o perfil do usuário, os links o direcionarão até o portal NOTIVISA.

Neste mesmo endereço eletrônico, a Agência disponibiliza um Guia Geral de Instruções denominado “**Manual do Usuário**” com o objetivo de instruir o usuário nos processos de execução da notificação.

Fundamentação Legal RDC N° 67 /2009; RDC N° 551/2021; RDC N° 557/2021.

13. FORMA DE APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM:

**Instruções de Uso HOOKUP | VS.:02
02/2025**

Os Modelos Comerciais da Família **HOOKUP** são produzidos e embalados em Área Classificada Sala Limpa ISO 8, sob rigoroso controle de qualidade. Todo o processo de fabricação e embalagem é de responsabilidade da Sintegra Surgical Sciencies Ltda. O produto é fornecido ESTÉRIL (Óxido de Etileno) em processo validado conforme normas vigentes. Além disso, os modelos comerciais do produto **HOOKUP** serão acondicionados e comercializados individualmente em um sistema de embalagem composto por duplo Blister PET, embalagem primária e secundária, selado em Papel Tyvek e embalado em uma caixa de papel cartucho, embalagem terciária. Ambas, embalagem secundária e terciária, contém rotulagem. Cada embalagem contém somente 1 (uma) unidade do produto fornecido.

A rotulagem do produto será impressa na embalagem terciária, caixa de papel cartão, contendo as informações para identificação do produto, modelo comercial, código, número de Registro ANVISA, número de Lote de produção, datas de fabricação e validade, identificação completa do fabricante e informações sobre como acessar a versão eletrônica ou impressa das Instruções de Uso do produto. A rotulagem também apresenta toda a simbologia aplicada ao produto (produto estéril de uso único, proibido reprocessar, método de esterilização, além da simbologia aplicada à conservação do produto).

As Instruções de Uso serão disponibilizadas em meio eletrônico no website da Sintegra, e a cópia física poderá ser solicitada via Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, conforme as orientações da RDC Nº 751 de 2022. As formas de acessar a versão eletrônica e de solicitar ao SAC o envio da versão impressa das Instruções de Uso serão informados na rotulagem externa do produto.

Todos os Modelos Comerciais serão fornecidos contendo 5 (cinco) etiquetas de rastreabilidade, com a identificação do fabricante, modelo comercial, código, número de Lote de produção, número de Registro ANVISA, datas de fabricação e validade. As etiquetas serão nomeadas de acordo com sua destinação (Distribuidor, Nota Fiscal de Venda, Prontuário Clínico, Cirurgião e Paciente).

A Etiqueta Indicadora de Esterilização será fixada na Embalagem Primária (Envelope Tyvek), barreira estéril. Apresenta a cor VERDE quando exposta ao Óxido de Etileno (em inglês: Green is EO Exposed). Portanto, em suma, o produto é apresentado conforme a seguir.

Embalagem individual contendo uma unidade do dispositivo médico contempla:

- **Sistema de Embalagem:** corresponde à embalagem individual do produto composta por BLISTER em PET (polietileno tereftalato) fechado e selado com PAPEL TYVEK, permeável ao Óxido de Etileno para esterilização. A embalagem individual é definida como a barreira estéril do produto.
- **Embalagem Comercial:** Embalagem composta por uma caixa de papel cartão com a rotulagem completa do produto e 5 Etiquetas de Rastreabilidade.
- **Rotulagem:** rotulagem impressa na embalagem terciária, caixa de papel cartão, contendo as informações para identificação do produto, modelo comercial, código, número de Registro ANVISA, número de Lote de produção, datas de fabricação e validade, identificação completa do fabricante e informações sobre como acessar a versão eletrônica ou impressa das Instruções de Uso do produto. Além disso, o produto será fornecido contendo 5 (cinco) etiquetas de rastreabilidade, com a identificação do fabricante, modelo comercial, código, número de Lote de produção, número de Registro ANVISA, datas de fabricação e validade. As etiquetas serão nomeadas de acordo com sua destinação (Distribuidor, Nota Fiscal de Venda, Prontuário Clínico, Cirurgião e Paciente).
- **Instruções de Uso:** As Instruções de Uso serão disponibilizadas em meio eletrônico no website da Sintegra, e a cópia física poderá ser solicitada via Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, conforme as orientações da RDC Nº 751 de 2022. As formas de acessar a versão eletrônica e de solicitar ao SAC o envio da versão impressa das Instruções de Uso serão informados na rotulagem externa do produto.

ATENÇÃO!!

- **CADA EMBALAGEM CONTÉM APENAS 1 (UM) MODELO COMERCIAL DO HOOKUP.**
- **PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.**
- **PROIBIDO REPROCESSAR E/OU REUTILIZAR O PRODUTO.**

- **DATA DE VALIDADE E N° DE LOTE: VIDE RÓTULO DA EMBALAGEM E ETIQUETAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO.**

15. RASTREABILIDADE:

A Síntegra Surgical Sciencies Ltda adotou um conjunto de **ETIQUETAS** para a identificação do produto implantado. Cada embalagem dos Modelos Comerciais do **HOOKUP** é acompanhada de 05 etiquetas, trazendo a identificação do fabricante, o número de lote, data de fabricação, data de validade, número de registro ANVISA, código e descrição do modelo comercial do produto.

DESTINO DAS ETIQUETAS
1- Prontuário Clínico
2- Paciente
3- Nota Fiscal de Venda
4- Distribuição
5- Cirurgião

O paciente poderá entrar em contato com o fabricante para eventuais dúvidas e informações sobre o produto. No caso de dúvidas e informações clínicas, a Síntegra recomenda que o paciente procure diretamente o médico responsável pelo procedimento.

É responsabilidade da equipe médica e do hospital (os depositários das informações e prontuários do paciente) a fixação da etiqueta na folha de descrição da cirurgia ou seção do prontuário médico.

16. SIMBOLOGIA APRESENTADA NA ROTULAGEM:

	Proteger do calor
	Proteger da umidade
	Validade dois anos a partir da data de fabricação (vide rótulo)

**Instruções de Uso HOOKUP | VS.:02
02/2025**

	Produto estéril Não reesterilizar
	Não Reutilizar Produto de Uso Único
	Consulte as instruções de uso através do site: http://www.sintegrasurgical.com.br/brasil/press/instructions
	Produto esterilizado em óxido de etileno
	Frágil
	Não utilizar caso a embalagem esteja danificada
	Dados do Fabricante
Não aplicável	PROIBIDO REPROCESSAR

17. TRANSPORTE:

Transportar de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de seu recebimento e de sua embalagem. É importante que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo junto ao produto para não danificar a embalagem e evitar a consequente contaminação.

18. ARMAZENAMENTO:

Em todas as áreas de estoque, antes da utilização, armazenar de forma a manter sua configuração e não danificar sua embalagem. Recomenda-se que sejam armazenados separadamente dos instrumentos.

- Armazenar em local com limpeza e higiene diária; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

**Instruções de Uso HOOKUP | VS.:02
02/2025**

- Armazenar em local seco e não expor diretamente à luz do sol. Deve ser armazenado à temperatura ambiente, protegido do calor e da umidade.
- Recomenda-se rotação de estoque pelo princípio “First In / First Out”: “o primeiro que entra é o primeiro que sai”.

Condições de Estocagem: O produto **HOOKUP** deve ser armazenado em local seco e mantido longe da luz solar direta, radiação ionizante, extremos de temperatura ou contaminação particulada.

Fabricante: SÍNTEGRA SURGICAL SCIENCIES LTDA

Rua Dr. Luiz Miranda, 1750 – Bairro Pirajá - Pompéia – SP CEP 17580-419

CNPJ: 06.373.225/0001-70 - Indústria Brasileira

Responsável Técnico: Alex Eugênio dos Santos CREA – SP 5063110270

REGISTRO ANVISA N. °: 80739429008

**Registro ANVISA, N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE:
VIDE RÓTULO DA EMBALAGEM**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (14) 3405-2373

sintegra.sac@sintegrasurgical.com.br